

WILLOW WOOD®

META® Flow

Instructions for Use

META® Flow™ prosthetic foot features the META-Unibody® prosthetic foot technology and an active dorsiflexion ankle providing 14° of energy efficient ankle movement. The META Flow is designed for non-invasive single patient use, is waterproof, and is available in carbon.

WHAT'S IN THE BOX

Meta Flow Prosthetic Foot
Adjustment Hex Wrench
Adjustment Guide Card
Bench Alignment Wedge
Spectra Sock
Instructions
Patient Advisory Warning

Additional Materials Required

Meta Flow Foot Shell


INDICATIONS FOR USE

- Lower extremity prosthesis users

CONTRAINdicATIONS FOR USE

- Patients who do not have clearance for the foot.
- Patients who exceed weight rating of the foot.
- Patients who lack sufficient strength to control energy response of the ankle.

ALIGNMENT

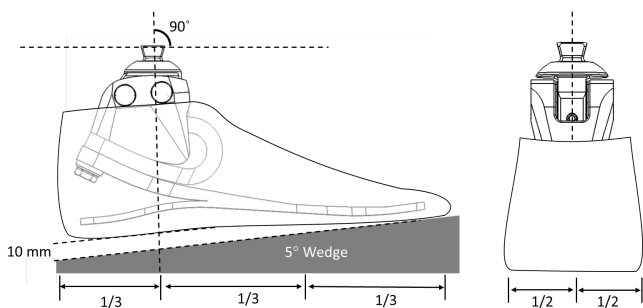

STIFFNESS ADJUSTMENT



TO SPEED UP PLANTARFLEXION
[DECREASE STIFFNESS]



STEP 2

Tighten posterior set screw to decrease spring compression.



TO SLOW DOWN PLANTARFLEXION
[INCREASE STIFFNESS]



STEP 2

Tighten anterior set screw to increase spring compression.



STEP 3

Hand tighten to 3Nm
Confirm both set screws are tight.



MAINTENANCE AND CLEANING

If you expose the Foot to sand, dirt, debris, or salt water:

1. Remove the Foot Shell and Foot Sock.
2. Clean out the sand.
3. Clean the Foot, the Foot Shell, and the Foot Sock with soap and water.
4. Allow the Foot Shell and Foot Sock to dry before reassembling.

If excessive debris is noticed within the META Flow ankle, you can rinse with fresh water or compressed air to remove the debris. It may help to rotate the ankle unit while rinsing with fresh water or blowing air.

If compressed air is used, wear proper PPE.

The foot is not field serviceable and there is no recommended maintenance schedule.

WARRANTY

The warranty for the Foot is three years from date of patient fitting. Use of the Foot for amputees whose modified body weight is more than 166 kg (365 lbs) or who engage in extremely high and abusive activity is against WillowWood's recommendations and will void the three year warranty. Modified body weight is defined as the weight of the amputee plus any loads carried by the amputee. "Extremely high and abusive activities" are defined as activities that could result in injury to an individual's natural feet; and activities that expose the prosthesis to corrosives such as salt water without adequate rinsing following exposure.

WARRANTY DISCLAIMER

WillowWood warrants that each product manufactured will, at the time of delivery, be of workmanlike quality and substantially free of defects. WILLOWWOOD MAKES NO OTHER WARRANTY, IMPLIED, OR EXPRESSED, AND MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This warranty shall terminate immediately upon an action to combine our products with other materials or in any manner to change the nature of our products. The sole remedy is replacement of the products or credit for the products. WillowWood's liability shall not exceed the purchase price of the product. WillowWood shall not be liable for any indirect, incidental, or consequential damage.

WILLOWWOOD RETENTION OF RIGHTS

WillowWood retains all intellectual property rights reflected or incorporated in its physical products, regardless of the transfer of the physical products to another party or parties.

REPORTING A SERIOUS INCIDENT

In the event of a serious incident occurring as a direct consequence of using this medical device, which either directly, or indirectly caused (a) the death of the patient/user or another person, (b) the temporary or permanent serious deterioration of the patient's, user's or other person's state of health or (c) a serious public health threat, please immediately report the incident by contacting WillowWood Global or, if in the EU, the authorized European Union representative and the competent authority within the member state in which the patient/user is established.

WILLOWWOOD®

WillowWood Global LLC
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
téléphone 740.869.3377 / 800.848.4930
télécopieur 740.869.4374 www.willowwood.com
Brevet www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



RENUNCIA DE GARANTÍA

WillowWood garantiza que cada producto fabricado, en el momento de la entrega, será de calidad profesional y sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Esta garantía terminará inmediatamente después de una acción para combinar nuestros productos con otros materiales o de cualquier manera para cambiar la naturaleza de nuestros productos. El único recurso es el reemplazo de los productos o el crédito por los productos. La responsabilidad de WillowWood's no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente.

WILLOWWOOD RESERVA DE DERECHOS

WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en sus productos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a otra entidad o entidades.

NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE GRAVE

En caso de que se produzca un incidente grave como consecuencia directa del uso de este producto, que haya causado directa o indirectamente la muerte del paciente/usuario o de otra persona, (b) el deterioro grave temporal o permanente del estado de salud del paciente, usuario u otra persona o (c) una amenaza grave para la salud pública, Por favor, informe inmediatamente del incidente poniéndose en contacto con WillowWood Global o el representante autorizado de la Unión Europea o del País correspondiente y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el paciente/usuario.

WillowWood®



WillowWood Global LLC
1541 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
téléphone 740.869.3377 / 800.848.4930
télécopieur 740.869.4374 www.willowwood.com
Brevet www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Si expone el pie a arena o suciedad,
o agua salada:

1. Retire la carcasa del pie y el calcetín del pie.
2. Sacuda la arena.
3. Limpie el pie, la carcasa del pie y el calcetín para pies con agua y jabón.
4. Deje que la carcasa del pie y el calcetín del pie se sequen antes de volver a instalar.

Si se observa un exceso de residuos dentro del META Flow tobillo, puede enjuagar con agua dulce o aire a presión para eliminar los residuos. Puede ser útil rotar la unidad del tobillo mientras se enjuaga con agua dulce o aplicación de aire.

Si se utiliza aire comprimido, use equipo de protección personal.

El pie no se puede reparar en el campo y no hay un programa de mantenimiento recomendado.

GARANTÍA

La garantía del pie es de tres años a partir de la fecha de aplicación en el paciente. El uso del pie para amputados cuyo peso corporal modificado es superior a 166 kg (365 libras) o que participan en actividades extremadamente altas y abusivas van en contra de las recomendaciones de uso adecuado de WillowWood's y anulará la garantía de tres años. El peso corporal modificado se define como el peso de la persona amputada más las cargas típicas que lleva la persona amputada. Las "actividades extremadamente elevadas y abusivas" se definen como actividades que podrían provocar lesiones en los pies naturales de una persona; y actividades que exponen la prótesis a corrosivos como el agua salada sin un enjuague adecuado después de la exposición.


INDICACIONES DE USO

- Usuario de prótesis de extremidades inferiores

CONTRAINDICACIONES DE USO

- Pacientes que no tienen espacio para el pie.
- Pacientes que superan el peso máximo indicado para el pie.
- Pacientes que carecen de fuerza suficiente para controlar la respuesta energética del tobillo.


ALINEACIÓN

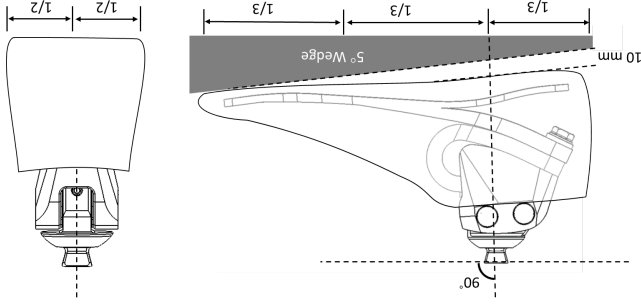

FLOW™ META-UNIBODY® AJUSTE DE RESISTENCIA

PARA ACELERRAR FLEXION PLANTAR (DISMINUIR RESISTENCIA)

PARA ACELERRAR FLEXION PLANTAR (DISMINUIR RESISTENCIA)

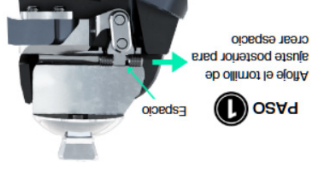

WILLOW
WOOD®

META® FLOW

Instrucciones de uso

META® Flow™ El pie protésico cuenta con la tecnología META-Unibody® de pie protésico y un tobillo de dorsiflexión activa que proporciona 14o de movimiento de tobillo energéticamente eficiente. El META Flow está diseñado para un uso no invasivo y para un solo paciente, es resistente al agua y está disponible en carbono.

QUE CONTIENE LA CAJA

Meta Flow Pie protésico

Llave hexagonal de ajuste

Tarjeta de guía de ajuste

Cuña de alineación de banco

Calceñ Spectra

Instrucciones

Advertencia al paciente

Materiales adicionales requeridos

Meta Flow Carcasa del pie